

COLOQUICK

A BETTER FUTURE



MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE DESCONGELACIÓN

Índice

Herramientas necesarias	2
Procedimiento y precauciones de seguridad	2
Guía de procedimiento.....	3

Procedimiento y precauciones de seguridad

Este manual es una guía para actualizar el descongelador ColoQuick a la última versión del sistema.


Conserve esta guía con la herramienta de actualización para que esté siempre disponible.

Tenga cuidado al manipular la herramienta de actualización, ¡es frágil!

Asegúrese de descargar la última versión en la tarjeta SD. La última versión se puede encontrar en el portal de distribuidores de ColoQuick.

- Los niños y las mascotas nunca deben dejarse con ColoQuick sin la supervisión de un adulto. Tenga especial cuidado cuando la cubierta y/o la puerta de servicio estén abiertas.
- La herramienta de actualización sólo debe ser utilizada por personal autorizado y capacitado por Calvex A/S.
- Debido a que es frágil, tenga cuidado al usar el dispositivo de actualización, especialmente los conectores.
- Existe riesgo de descarga eléctrica cuando la puerta de servicio está abierta. Sólo debe ser abierto por personal autorizado y capacitado por Calvex A/S.

Tools needed

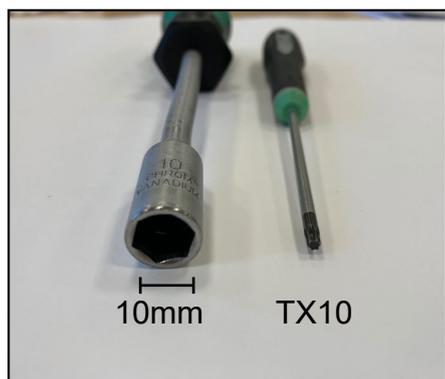

Herramienta de actualización de tarjetas SD. La versión actualizada del sistema está disponible en el portal de distribuidores de ColoQuick.

Descripción del procedimiento



1. Coloque la unidad DESCONGELADORA a una altura adecuada para facilitar el acceso. Abra la tapa para desactivar el sensor de la tapa. **¡Asegúrese de que la máquina esté apagada!**



2. Retire las tuercas para desbloquear la puerta de servicio. **¡CUIDADOSO! ¡Peligro de descarga eléctrica al abrirlo! ¡APAGUE LA UNIDAD!**



3. Abra la puerta de servicio para acceder a la caja negra.



4. Quite los cuatro tornillos y quite la cubierta negra de la caja. **¡CUIDADOSO! ¡Riesgo de shock eléctrico!**



5. ¡No toque los componentes eléctricos cuando la máquina esté encendida!




6. Encienda el equipo. Asegúrese de que haya agua en el tanque para evitar que el calentador se sobrecaliente.



7. El número de versión del sistema instalado puede verse en la esquina inferior derecha del monitor cuando se enciende.




8. Asegúrese de que la herramienta de actualización tenga la última versión del sistema, disponible en el portal del distribuidor.

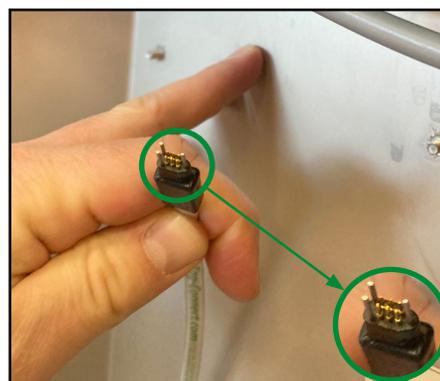


9. Asegúrese de que el conector de la herramienta de actualización esté colocado exactamente como se muestra en esta figura con dos puntos en el lado izquierdo.



Descripción del procedimiento

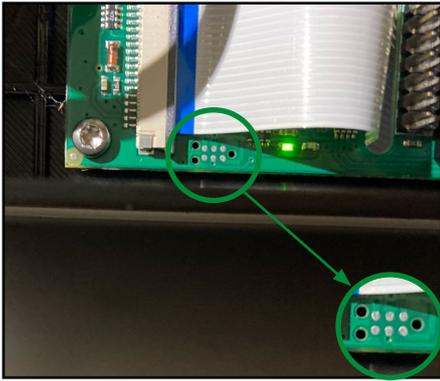


10. El conector de la unidad de control se encuentra cerca de la esquina inferior izquierda. Así como en un círculo arriba.

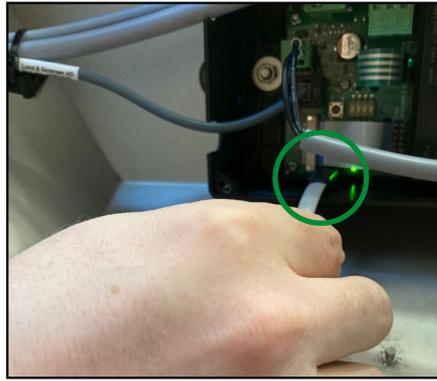

11. Enchufe y sostenga correctamente el conector de la herramienta de actualización en la conexión de la unidad de control.



12. Espere hasta que la luz indicadora de la herramienta de actualización parpadee en verde.

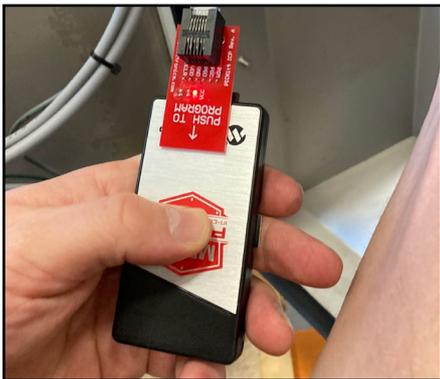


13. Mantenga presionado el botón de la herramienta de actualización durante unos segundos.



14. Durante la actualización, la herramienta de actualización parpadeará con luz violeta.



15. Cuando se completa la actualización, la herramienta de actualización parpadea en verde.

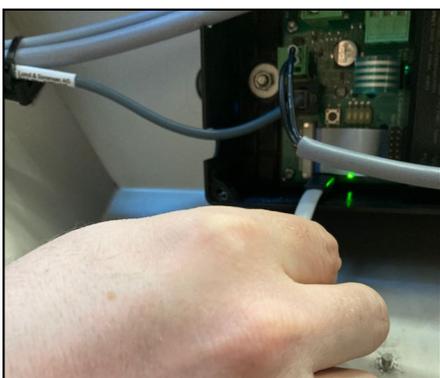

16. Retire el conector de la herramienta de actualización.



17. Configure los ajustes predeterminados (unidad, temperatura y tiempo).



18. Apague la unidad de DESCONGELACIÓN y vuelva a encenderlo para verificar que el número de versión sea correcto.

Descripción del procedimiento



19. Vuelva a colocar la tapa de la caja negra con los cuatro tornillos.



20. Monte las tuercas para bloquear la puerta de servicio.



21. La unidad DESCONGELACIÓN ahora está lista para usar.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos:

ColoQuick

Teléfono: +45 9753 7333

Email: info@ColoQuick.com



